

560*101.1mm



Empfohlene Anwendung

Verwenden Sie die positive Ionenfunktion mit Nerova ION Gel, um ihre Haut zu revitalisieren und jünger erscheinen zu lassen. Sie können die negative Ionenfunktion vorher mit LipoHydro Cleansing Milk nutzen, um die Haut zu gründlich tiefen zu reinigen. Es wird empfohlen, nur die Produkte aus dem Set zu benutzen, weil sie aufeinander abgestimmt sind.

Austauschbare Aufsätze




Gesichtsaufsatz

Wird für Gesicht, Hals, Dekolleté, Hände und Füße genutzt.



Punktbehandlung

Dieser Aufsatz wird für Lippen und Pickeln genutzt.

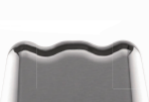

Körperaufsatz

Wird für Bauch, Beine, Po und Arme für bessere Abdeckung und intensivere Massagewirkung genutzt.

Für beste Ergebnisse entsprechend individueller Haut:

Gesicht



- 3 Minuten für Gesicht, 2x wöchentlich
- **Niedrige Stufe:** empfindliche Haut
- **Mittlere Stufe:** normales Gesicht

Körper



- 5-9 Minuten pro Bereich, 1x wöchentlich
- **Hohe Stufe:** dickere Hautbereiche (z. B. Beine, Arme, Bauch)

* Ein leichtes Kribbeln während der Anwendung ist normal und unbedenklich.

Gesichts-anwendung

Für beste Ergebnisse immer von der Gesichtsmitte nach außen:

1. Vom Nasenrücken unter dem Auge bis zum Ohr
2. Vom Nasenflügel bis zum Ohr
3. Von unter der Nase bis zum Ohrläppchen
4. Von unter dem Mund bis hinter das Ohrläppchen
5. Vom Kinn bis hinter das Ohrläppchen
6. Unter dem Kinn bis Kieferende
7. Wechsel zu anderen Seite, von unten nach oben das gleiche
8. Oben die Stirn von hoch zu runter und wieder zur anderen Seite wechseln



Schritt: Behandlung von Problemzonen
Sollten öfters behandelt werden

Bedienungsanleitung

Drücken Sie die P-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. *Alle 25 Sekunden ertönt ein Signalton, wenn sie alles richtig ausführen*

a) Drücken Sie die F-Taste, um den Modus auszuwählen. Wählen Sie positive oder negative Ionen mit der S-Taste.

b) Stromstärke einstellen: Niedrig / Mittel / Hoch mit der S-Taste.

c) Behandlungsdauer einstellen. Wählen Sie die Dauer (1-9 Minuten) mit der S-Taste.

a) Feuchte Hände und die Chromtasten an der Seite berühren. Setzen Sie den Aufsatz auf die Haut.

b) Während der Behandlung ertönt alle 25 Sekunden ein „Beep“-Signal.

c) Zwei Signaltöne („Beep Beep“) zeigen an:

- Behandlung beendet
- Gerät schaltet sich automatisch aus

Reinigen Sie den Aufsatz nach der Anwendung mit: feuchter Watte oder einem weichen Tuch.



Nerova Device Bio-Mikrostromgerät

Die Mikrostrom-Technologie ist eine der Innovationen in der modernen Hautpflege. Die Mikrostrombehandlung ist zu einer beliebten Anti-Aging-Methode geworden, um das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten zu reduzieren.

Sie verbessert die Hautstruktur und das Hautbild und reduziert sichtbar die Zeichen der Hautalterung.

Das Gerät arbeitet mit sanften elektrischen Impulsen (positive und negative Ionen), die tief in die Hautzellen eindringen und diese revitalisieren und regenerieren.

Das Nerova Device ist ein multifunktionales Beauty-Gerät für den Heimgebrauch, mit dem Sie professionelle Hautpflege wie im Kosmetikstudio bequem zu Hause genießen können.



Vorteile

Ein Geheimtipp für jugendliche und schöne Haut

- Strafft und festigt die Haut
- Reduziert feine Linien und Falten
- Verkleinert vergrößerte Poren
- Stimuliert Kollagen, Elastin, Durchblutung und Wirkstoffaufnahme
- Spendet Feuchtigkeit und revitalisiert die Haut

Funktionsprinzip von Bio-Mikrostrom

Mikrostrom wirkt auf die Regeneration und Erneuerung von Zellgewebe und lädt die Zellen energetisch auf. Nach dem Prinzip: Gleich geladene Teilchen stoßen sich ab, entgegengesetzte ziehen sich an. Wenn die Zellen ihr elektrisches Gleichgewicht wiederherstellen, wird der normale Stoffwechsel aktiviert, die Zellen revitalisiert und die Haut wirkt: voller, straffer, strahlender.

Bei regelmäßiger Anwendung können Falten sichtbar reduziert werden.

Glattere, weichere und jugendlichere Haut



Wird zur Reinigung verwendet, da dabei eine Art „saureres Wasser“ entsteht, das:

- die Haut mit Feuchtigkeit versorgt
- Bakterien beim Kontakt reduziert
- die Haut beruhigt
- Fett und Talg aufweicht und leichter entfernbar macht

Empfohlen in Kombination mit LipoHydro Cleansing Milk

Zusätzliche Effekte:

- Beruhigt die Haut
- Verkleinert die Poren
- Entfernt Schmutz und Mitesser

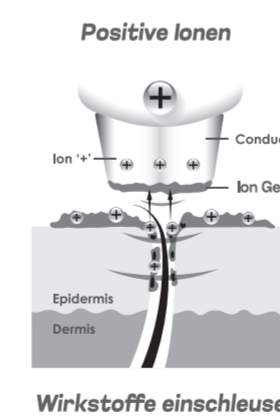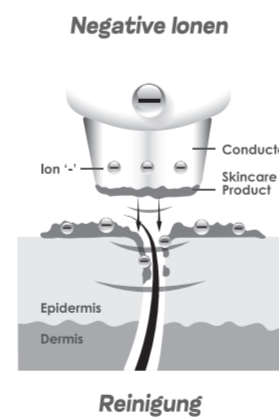

Je häufiger die Behandlung stattfindet, desto effizienter arbeitet der Zellstoffwechsel für: Recommend to use with skincare products.

- Hautreparatur
- jugendliches Hautbild

Effekte:

- Stimuliert die Aktivität der Hautzellen
- Fördert Durchblutung und Stoffwechsel
- Reduziert Falten, dunkle Flecken und Pigmentierung
- Verbessert die Aufnahme von Wirkstoffen in der Haut

Vorbereitung vor der Anwendung

1. Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf (ca. 3 Stunden). Das Gerät ist wiederaufladbar; Sie können den Akku über ein USB-Kabel am PC oder über einen Adapter an einer Steckdose laden. Die Kontrollleuchte leuchtet beim Laden rot und wechselt zu grün, sobald der Akku vollständig geladen ist.
2. Entfernen Sie vor der Anwendung Make-up und Fett von der Haut
3. Tragen Sie vor der Anwendung immer LipoHydro Cleansing Milk auf das Gesicht auf und spülen sie es wieder ab. Danach 3 Tropfen Pure Micelle Skin Tonic auftragen.
4. Wenn das Gerät durch Schmutz oder Fett verunreinigt ist, reinigen Sie es bitte mit einem weichen, feuchten Tuch.

Geeignet für:

Alle Hauttypen, bei sehr empfindliche Haut, bitte vorher an einer Stelle testen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie das Gerät nicht zu lange auf derselben Stelle.
- Legen Sie vor der Anwendung sämtlichen Metallschmuck ab..
- Nicht auf Wunden oder Ekzemen anwenden. Bei Hautallergien bitte nicht verwenden.
- Das Gerät funktioniert nur, wenn:
 - beide seitlichen Kontaktflächen korrekt mit der Hand gehalten werden
 - es zusammen mit den vorgesehenen Produkten verwendet wird

Pflege / Wartung

- Schalten Sie das Gerät nach der Anwendung aus
- Entfernen Sie den Aufsatz und reinigen Sie ihn nach jeder Nutzung.
- Bewahren Sie das Gerät im Samtbeutel auf.

Wichtige Hinweise

- Das Gerät ist nicht wasserdicht – bitte nicht waschen oder ins Wasser tauchen.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Netzteile.

